

NÁVOD NA POUŽITIE

PNEUMATICKÝ KOMPRESNÝ MASÁŽNY SYSTÉM



CE

SK

Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Prosím, pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Výrobok sa nesmie používať, kým si tento návod neprečítate a nepochopíte ho.

UPOZORNENIE: Skontrolujte všetky časti, či nie sú počas prepravy poškodené. Ak sa také poškodenie zistí, VÝROBOK SA NESMIE používať. Viac informácií získate u predajcu.

KONŠTRUKCIA A ZLOŽENIE

Systém sa skladá z elektronickej hlavnej jednotky a nafukovacích vzduchových manžiet. Manžety sú vyrobené z kompozitného materiálu TPU a nylonovej tkaniny a delia sa na manžety horných končatín, dolných končatín a pása. Používateľ si ich vyberá podľa potreby. Manžety je potrebné pripojiť k hlavnej jednotke vzduchovými hadicami. Ak sa používajú dve manžety súčasne, je potrebný rozdeľovač; pri troch manžetách sú potrebné dva rozdeľovače.

POPIS TLAČIDIEL

Tlačidlo zníženia tlaku – jedno stlačenie zníži tlak o jednu úroveň.

Tlačidlo zvýšenia tlaku – jedno stlačenie zvýši tlak o jednu úroveň.

Tlačidlo výberu komory – vyberte čísla 1–6 na určenie, ktoré komory budú pracovať.

Tlačidlo výberu režimu – stlačte „MODE“ na zmenu režimu.

Tlačidlo nastavenia času – stlačte „TIME“ na nastavenie času terapie.

Štart/Pauza – modré svetlo znamená prevádzku, oranžové znamená pauzu (manžety sa vyfúknu).

Napájací konektor – 110–240 V, 50/60 Hz.

Konektor pre vzduchové hadice – zarovnajte trojuholníkové značky na zástrčke a konektore pre správne pripojenie.



SPÔSOB POUŽITIA

Pripojte napájanie, aby ste zapli zariadenie – ostatné tlačidlá reagujú okamžite po dotyku.

Zástrčka vzduchovej hadice má vystúpenú trojuholníkovú značku a konektor na hlavnej jednotke má trojuholníkovú drážku. Uistite sa, že oba trojuholníky sú v rovnakom smere, a potom pripojte zástrčku.

Zasuňte tmavosivú zástrčku vzduchovej hadice do tmavosivého konektora na vzduchovej manžete a následne pripojte ostatné svetlosivé konektory v správnom poradí. Pred každým použitím skontrolujte všetky pripojenia.

Nasadzte nafukovacie manžety (na hornú končatinu, pás alebo dolnú končatinu) na požadované časti tela určené na kompresiu a zapnite zips.

Po pripojení napájania sa rozsvieti kontrolka. Vyberte čas kompresie podľa individuálnych potrieb. Čas je možné nastaviť v rozmedzí 10–60 minút s presnosťou ± 5 minút. Tlak je možné regulovať v rozmedzí 30–250 mmHg. Čas potrebný na dosiahnutie nastaveného tlaku závisí od počtu súčasne pripojených manžiet – čím viac manžiet, tým dlhšie trvá nafúknutie.


Ak sa počas prevádzky objaví nepohodlie, okamžite stlačte tlačidlo pauzy alebo odpojte napájanie hlavnej jednotky a potom odpojte vzduchovú hadicu.

Po skončení používania najprv stlačte pauzu, potom odpojte napájanie hlavnej jednotky. Odopnite suchý zips alebo rozopnite zips a zložte manžetu.

Na vyfúknutie manžety odpojte vzduchovú hadicu od zariadenia a stlačte manžetu, čo uľahčí zloženie a skladovanie.

PRACOVNÉ REŽIMY (na príklade 6-komorovej manžety)

Režim A: Postupné nafukovanie komôr od distálnej po proximálnu, každá 12 s.
 Režim B: Postupné nafukovanie komôr až do úplného naplnenia, cyklus 72 s.
 Režim C: Nafukovanie po dvojiciach (1+2, 3+4, 5+6), cyklus cca 75 s.
 Režim D: Všetky komory súčasne 72 s, následne spoločné vyfúknutie počas 25 s.
 Režim E: Kombinácia režimov A a B (cca 140 s), potom vyfúknutie a nový cyklus.

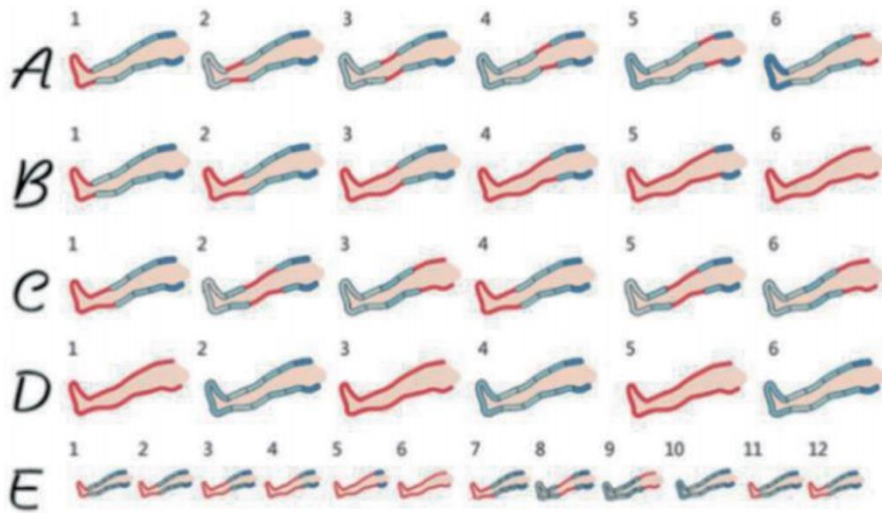

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Prevádzková teplota: 5–40 °C
 Vlhkosť: ≤80 %
 Atmosférický tlak: 86–106 kPa
 Napájanie: 110–240 V ±22 V, 50/60 Hz
 Čas nafúknutia komory: 12–18 s
 Maximálny tlak: 250 mmHg (nastaviteľný)
 Hluk: ≤55 dB
 Čas: 10–60 min (chyba ±3 min)

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Manžety používajte cez ľahké oblečenie, odstráňte predmety z vreciek, šperky atď.
 Nenastavujte okamžite vysoký tlak.
 Pri bolesti, nepohodlí alebo nezvyčajných reakciách prerušte používanie.
 Staršie osoby, deti alebo osoby s obmedzenou pohyblivosťou by mali používať pod dohľadom.
 Nepoužívať na horúcich povrchoch (radiátory, sporáky).
 Nevystavujte hlavnú jednotku vode.
 Kontraindikácie: rany, zápaly, deformácie končatín, čerstvé krvné zrazeniny, srdcové ochorenia, pľúcny edém, lekárske implantáty v končatinách atď.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením odpojte napájanie.
 Hlavnú jednotku čistíte vlhkou handričkou (nepoužívať benzín, alkohol, rozpúšťadlá).
 Manžety utierajte suchou handričkou s 75 % alkoholom. Neprať vo vode. Sušiť vo vzduchu na dobre vetranom mieste, skladovať v suchom prostredí.
 Manžety možno zavesiť na vešiak, vzduchové hadice trvalo neohýbať.

TYPOVÉ PORUCHY

Časť manžety sa nenafukuje: skontrolujte, či je stlačené správne tlačidlo komory a či nie je hadica odpojená.



OBSAH BALENIA: Pneumatický kompresný systém, Návod na použitie

SKLADOVANIE: Výrobok skladujte na suchom mieste, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

LIKVIDÁCIA: Po vyradení z prevádzky výrobok zlikvidujte ako bežný komunálny odpad. Dodržujte predpisy pre triedenie odpadu. Chráňte životné prostredie.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



FOSHAN HONGFENG CO.,LTD
Add. No.4-2 Leqiang Road,
Leping Sanshui Foshan,
528100, Guangdong, Chins

Dátum vydania návodu: 03.09.2025
v1-03.09.2025

