

AT04608

NÁVOD NA POUŽITIE, BRUŠNÝ PÁS



Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod na použitie. Nepoužívajte výrobok predtým, ako sa s týmto návodom zoznámite a pochopíte ho. Ak nerozumiete varovaniám, upozorneniam a odporúčaniam, kontaktujte odborníka na zdravotnú starostlivosť alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu produktu alebo zraneniam.

UPOZORNENIE: Skontrolujte všetky časti výrobku na poškodenia spôsobené počas prepravy. V prípade zistenia akýchkoľvek poškodení výrobok **NEPOUŽÍVAJTE**. Ďalšie informácie získate u predajcu.

CIELOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je tento výrobok určený (pozri časť týkajúcu sa určenia výrobku v tomto návode). Produkt môže byť zakúpený užívateľom samostatne alebo na základe odporúčania lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Pri samostatnom nákupe produktu alebo pri jeho odporúčaní lekárom/terapeutom/iným odborníkom je potrebné zohľadniť dostupné veľkosti/požadované funkcie a varianty výrobku, indikácie a kontraindikácie na používanie, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

POUŽITIE/INDIKÁCIE

Brusný pás je ortopedický produkt, ktorý poskytuje účinnú podporu pre oblasť brucha, chrbta a bedrových svalov. Môže sa používať preventívne na podporu správneho držania tela a ochranu chrbtice pred nadmerným zaťažením. Zapínanie na suchý zips umožňuje reguláciu. Najčastejšie sa odporúča pri brušnej kýli, oslabení brušných svalov, po pôrode, po operáciách brušnej dutiny a po chirurgických zákrokoch.

Brusný pás slúži na posilnenie brušných svalov a prevenciu posunutia vnútorných orgánov v dôsledku brušných kýl. Zapínanie na suchý zips umožňuje širokú reguláciu, čo zabezpečuje dokonalé prispôsobenie sa telu. Pás sa odporúča pri brušnej kýli, oslabení brušných svalov, po pôrode, po operáciách brušnej dutiny a po chirurgických zákrokoch. Vďaka pevnej konštrukcii a ľahkej regulácii pás podporuje správne držanie tela a chráni chrbticu pred nadmerným zaťažením.

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzikálne alebo mentálne obmedzenia (napr. zrakové postihnutie), ktoré bránia bezpečnému zaobchádzaniu s výrobkom.

Kožné ochorenia: Akékoľvek zápal, vredy, rany alebo podráždenia kože v oblasti, kde má byť pás nosený, môžu zabrániť jeho používaniu.

Ochorenia obehového systému: Pri niektorých ochoreniach obehového systému, ako je obehové zlyhanie, môže byť dlhodobý tlak nevhodný.

Problémy s dýchaním: Osoby s dýchacími problémami, ako je astma, môžu pociťovať nepohodlie v dôsledku tlaku pásu na hrudník a brucho.

Poruchy tráviaceho systému: Niektoré osoby s tráviacimi problémami, ako je reflux alebo syndróm dráždivého čreva, môžu pociťovať nepohodlie alebo zhoršenie príznakov.

Intolerancia tlaku: Osoby, ktoré pociťujú nepohodlie alebo bolesť spojenú s tlakom, môžu mať problémy s tolerovaním pásu.

Niektoré pooperačné stavy: V niektorých prípadoch môže lekár rozhodnúť, že pás nie je vhodný po operácii kvôli riziku komplikácií.

ZLOŽENIE

Brusný pás, návod na použitie

VLASTNOSTI A ROZMERY

Pásky sú k dispozícii v dvoch výškach: 24 cm a 32 cm v 7 veľkostiach: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Veľkosť (obvod pásu):

XS - <80 cm

S - 80-90 cm

M - 91-100 cm

L - 101-110 cm

XL - 111-120 cm

XXL - 121-140 cm


XXXL - >140 cm

Materiál: Polyamid (Pa) 15%, Polyester (Pes) 75%, Elastan (EA) 10%

POUŽITIE

Otvorte suchý zips. Pás sa umiestni na lumbosakrálnu oblasť chrbtice a následne sa zapne vpredu pomocou suchého zipsu.

Produkt má širokú reguláciu. Produkt sa dá rýchlo a ľahko prispôsobiť tvaru tela pacienta. Zapínanie na suchý zips zabezpečuje účinné imobilizovanie.

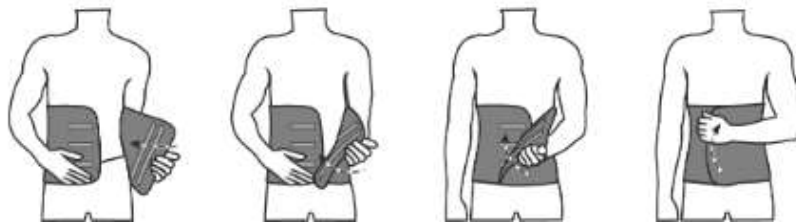

POZNÁMKY A UPOZORNENIA

Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod.

Pred každým použitím sa uistite, že produkt nemá žiadne opotrebovanie na švoch a jednotlivých častiach.

Používanie produktu v rozpore s pokynmi v návode môže viesť k vážnym komplikáciám.

Produkt by mal byť používaný podľa odporúčaní lekára alebo fyzioterapeuta.

Produkt nepoužívajte pri otvorených ranách, poškodení pokožky alebo po použití ohrievacieho gélu alebo masti.

Nosenie produktu v noci je povolené iba na odporúčanie ošetrojúceho lekára.

Skontrolujte stav pokožky v mieste, kde produkt prilieha, a ak sa objavia akékoľvek zmeny, kontaktujte lekára.

Ak lekár neodporučí inak, produkt by nemal byť nosený viac ako 4 hodiny denne.

UPOZORNENIE:

V prípade „závažnej udalosti“ súvisiacej s výrobkom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla k alebo môže viesť k niektorému z nasledujúcich:

- a) úmrtie pacienta, používateľa alebo inej osoby,
 - b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby,
 - c) vážne ohrozenie verejného zdravia,
- túto „závažnú udalosť“ je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu v krajine, kde má používateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

Ak sa objavia bolesti, alergické reakcie alebo iné znepokojujúce, nejasné príznaky súvisiace s používaním zdravotníckeho výrobku, obráťte sa na zdravotnícky personál.

UPOZORNENIE:

Je zakázané používať produkt iným spôsobom, než je určené.

ČISTENIE

Brišný pás je možné prať iba ručne v teplej vode (do 40 °C) s použitím jemného čistiaceho prostriedku (napr. mydlom).

Nežehliť. Nečistiť chemicky. Nepoužívať bielinidlo. Chrániť pred vlhkosťou. Nevystavovať vysokým teplotám. Nesušiť v sušičke. Sušiť na rovnom povrchu a jemne vymačkať pred sušením.

SKLADOVANIE

Produkt skladujte na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia.

LIKVIDÁCIA

Po skončení používania produktu ho môžete likvidovať ako bežný komunálny odpad. Dbajte na ochranu životného prostredia a dodržiavajte normy a zásady triedenia odpadu.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

PRVÝ KONTAKT: Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 10.01.2025
v1-10.01.2025

