

AT51041

NÁVOD NA POUŽITIE CHODÍTKO



ÚČEL

Skladacie chodítko je určené pre ľudí s problémami s vertikalizáciou, s chorobami pohybového ústrojenstva alebo pre ľudí s problémami s udržaním rovnováhy pri chôdzi. Chodítko poskytuje užívateľovi oporu, čím sa znižuje riziko prevrátenia. Výrobok dobre posлuží pri učení sa chôdže alebo po úrazoch.

CHARAKTERISTIKA

- vyrobené z vystuženého hliníka
- vybavené sadou protišmykových nožíčiek
- jednoduché skladanie a preprava, zložené jedným tlačidlom
- 8 úrovní nastavenia výšky
- ergonomické penové rukoväte

KONTRAINDIKÁCIE

fyzické alebo psychické obmedzenia (napr. zhoršenie zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

UPOZORNENIA:

1. Pred použitím chodítka si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.
2. Používanie výrobku na podklade, ktorý neposkytuje určitú stabilitu, t. j. na mokrom, zľadovatenom, mastnom, veľmi prašnom podklade, nie je povolené z dôvodu rizika pádu.
3. Pred každým použitím vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých konštrukčných prvkov výrobku vrátane dôkladnej kontroly stability a stavu nosného rámu.
4. Výrobok je určený len na podopieranie a je určený pre jedného používateľa. Je zakázané stáť na chodítku.
5. Neprekračujte maximálnu výšku.
6. Nepoužívajte, ak hmotnosť používateľa presahuje 110 kg
7. Chodítko nepoužívajte, ak zistíte akékoľvek viditeľné alebo hmatateľné poškodenie (napr. praskliny), pretože to môže viesť k nehode.
8. Nenakláňajte sa z chodítka. Môže to spôsobiť pád používateľa.
9. Nehojdajte chodítko. Môže to spôsobiť pád používateľa.
10. Zabráňte kontaktu s otvoreným ohňom

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
 - b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
 - c) vážne ohrozenie verejného zdravia,
- je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade bolesti, alergických reakcií alebo iných rušivých, pre používateľa nejasných symptómov súvisiacich s používaním zdravotníckej pomôcky, sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok iným spôsobom, než na aký je určený!

UPOZORNENIE: Pred použitím skontrolujte, či sú všetky prvky správne zmontované.

UPOZORNENIE: Počas používania a manipulácie s výrobkom, ako aj pri jeho montáži a nastavovaní mechanizmov môže hroziť riziko zachytenia a/alebo stlačenia častí tela užívateľa/asistenta v otvoroch/medzerách medzi prvkami. Tieto kroky by sa mali vykonávať obzvlášť opatrne. Po nastavení stabilizujte polohu opatrným utiahnutím matíc/skrutiek

POZNÁMKA: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nesprávnym servisom alebo nedodržaním odporúčaní obsiahnutých v tomto návode.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výška: 72 - 89,5 - 8 stupňov nastavenia, každých 2,5 cm

Šírka medzi rúčkami: 49 cm

Šírka: 60 cm

Šírka v zloženom stave: 11 cm

Dĺžka: 51

Rozmery balenia: 580x120x760 cm

Maximálna hmotnosť užívateľa: 110 kg

Hmotnosť: 2,3 kg

Hmotnosť s kartónom: 3,3 kg



TENTO SYMBOL OZNAČUJE MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ UŽÍVATEĽA

ROZKLADANIE

Chodítko rozložíte vytiahnutím jeho strán smerom von.

SKLADANIE

Ak chcete chodítko zložiť, stlačte tlačidlo západky a potiahnite bočné strany chodítka dovnútra a potom chodítko zložte.

CHÔDZA S CHODÍTKOM S AKTIVOVANOU FUNKCIOU CHÔDZE

Funkcia chôdze sa aktivuje, keď sú poistné kolíky chôdze zaistené v prednej časti chodítka. Postavte sa vedľa chodítka a držte rukoväť chodítka oboma rukami. Pohyb s týmto typom chodítka zahŕňa striedavé zdvíhanie bokov chodítka nahor a ich posúvanie dopredu, pričom sa zároveň pohybujú dolné končatiny.

CHÔDZA S CHODÍTKOM S VYPNUTOU FUNKCIOU CHÔDZE

Pohyb s chodítkom v deaktivovanom stave zahŕňa jeho posunutie dopredu a následné priblíženie končatín. Poistka funkcie by mala byť umiestnená v bočných otvoroch.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je táto pomôcka určená (pozri časť týkajúcu sa účelu použitia pomôcky v tomto návode). Produkt si môže používateľ zakúpiť sám alebo na základe odporúčania lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie/rozmery/varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

ÚDRŽBA PRODUKTU

Výrobok by sa mal pravidelne čistiť vodou a jemnými čistiacimi prostriedkami. Výrobok môže byť vystavený pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov. Uistite sa, že dezinfekčný prostriedok neobsahuje agresívne chemikálie, ako sú silné kyseliny a zásady. Nepoužívajte drsné čistiace predmety ani silné čistiace prostriedky.

SKLADOVANIE

Ak sa výrobok nepoužíva, mal by byť skladovaný na suchom a chladnom mieste v pôvodnom obale. Vyhnite sa vlhkým miestnostiam a dlhodobému vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Zdravotnícka pomôcka sa môže likvidovať ako bežný domový odpad.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....


Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

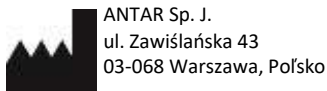

ANTAR Sp. J.

ul. Zawisłańska 43

03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,

E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk

Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 19.06.2023

v1-19.06.2023