



NÁVOD NA POUŽITIE

ORTÉZA NA ZÁPÄSTIE AT53044





Všeobecné informácie

Zápästná ortéza je vyrobená z vysokokvalitnej tkaniny, ktorá poskytuje vynikajúcu pevnosť, pružnosť a pohodlie, ako aj správne prispôbenie. Zabudovaná silikónová podložka poskytuje jemnú tlakovú masáž mäkkých tkanív, ktorá zvyšuje prietok krvi a urýchľuje zmenšovanie opuchov. Poskytuje pevnú a účinnú oporu a zabraňuje zraneniam. Výrobok je navrhnutý tak, aby poskytoval maximálnu oporu pri zachovaní pohodlného nosenia.

Výrobok je vhodný na každodenné použitie aj na športové využitie. Je dôležité zvoliť správnu veľkosť, aby sa zabezpečil maximálny úžitok a zabránilo sa nadmernej kompresii. Ak sa ortéza používa po úraze, vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa stav nezlepší do 72 hodín. Ak je zranenie vážne alebo ak máte akékoľvek pochybnosti, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Pri používaní deťmi sa vyžaduje dohľad dospelého osoby. Uchovávať mimo dosahu malých detí.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
 - b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
 - c) vážne ohrozenie verejného zdravia,
- je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

VAROVANIE:

Ak máte cukrovku alebo zlý krvný obeh, pred použitím výrobku sa poraďte so svojím lekárom. Ak kedykoľvek pocítite bolesť, vyrážku alebo zvýšenú bolesť, prerušte používanie a poraďte sa so svojím lekárom.

UPOZORNENIE: nepoužívajte výrobok, ak boli použité hrejivé tekutiny alebo masti, nepoužívajte v prípade poranenia kože!

Indikácie:

- zranenia zápästia,
- ochorenia zápästia,
- rehabilitácia po rôznych úrazoch zápästia,
- ochranné opatrenie v prípade slabosti zápästia,
- posttraumatické zmeny,
- počas obdobia rehabilitácie po operácii

Kontraindikácie:

- ak sa objaví bolesťivosť alebo vyrážka, okamžite prestaňte používať a vyhľadajte lekársku pomoc

Vlastnosti:

- Ortéza zabezpečuje funkciu v optimálnom anatomickom rozsahu pohyblivosti.

Pokyny na čistenie výrobku:


- Ortéza sa môže prať len ručne vo vlažnej vode (do 40 °C) s jemným pracím prostriedkom (napr. sivým mydlom).
- Nežehlite.
- Nečistite chemicky.
- Nepoužívajte bieliadlo.
- Chráňte pred vlhkosťou.
- Nevystavujte vysokým teplotám.
- Nesušte v sušičke.
- Sušte rozložené, pred sušením jemne stlačte.

Skladovanie:

Skladujte na suchom mieste.

SPÔSOB LIKVIDÁCIE PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po vyradení pomôcky z prevádzky možno zdravotnícku pomôcku zlikvidovať ako bežný komunálny odpad. Ortéza sa nosí nasadením na ruku.

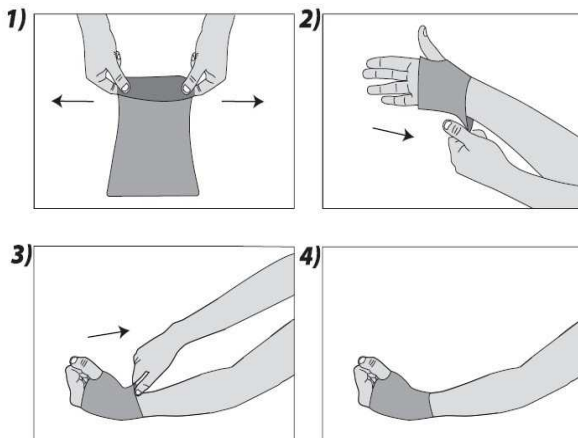

Ak chcete zistiť správnu veľkosť, zmerajte obvod ruky (obrázok 5).



Obr. 5

Dostupné veľkosti: M 17-19 cm), L (19-21 cm), XL 21-23 cm), XXL (23-25 cm)

Ortéza je k dispozícii pre pravú aj ľavú ruku. Obsah balenia: Ortéza

Zloženie: 60% nylon, 30% latex, 10% spandex

Upozornenia: Nepoužívajte výrobok, ak boli použité hrejivé tekutiny alebo masti, nepoužívajte v prípade poškodenia pokožky.

Poznámky:

- Pred nasadením ortézy si prečítajte obsah tohto návodu na použitie.
- Pred každým použitím sa uistite, že nedošlo k odreniu švov ortézy.
- Používanie výrobku v rozpore s pokynmi môže mať za následok vážne komplikácie.
- Ortéza by sa mala používať podľa odporúčania lekára alebo fyzioterapeuta.
- Výrobok sa nesmie používať v prípade otvorených rán, odrenín epidermy alebo po predchádzajúcej aplikácii hrejivého gélu alebo masti.
- Nosenie ortézy v noci je možné len na odporúčanie ošetrojúceho lekára.
- Dĺžku nosenia ortézy je potrebné konzultovať s lekárom.



ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRÍLOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 28. júna 2022
v1-1 28/06/2022

