



4098

KOŁNIERZ SZYJNY PROFESJONALNY

INSTRUKCJA UŻYCIA

PUBLIKACJA: 2021-04-30
WERSJA: 03**Przeznaczenie/Wskazanie/Docelowy Użytkownik**

- Urządzenia łagodzą ból występujący w wyniku urazu o charakterze „smągnięcia biczem”, sztywności karku i urazu przeciążeniowego. Zapewniają stabilność odcinka szyjnego kręgosłupa i utrzymują go w neutralnej pozycji.
- Tieto zariadenia sú určené pre osoby, u ktorých sa vyskytujú natiahnutia horných končatín, vyvrtnutia, poškodenia v dôsledku preťaženia alebo chybné polohy kĺbov.

Właściwości Wyrobu

Wyroby zapewniają wsparcie terapeutyczne osobom z urazami karku. Wyprofilowane materiały gwarantują stabilne i wygodne dopasowanie, a otwory służą do odpowiedniej wentylacji. Zapięcie na rzepy umożliwia użytkownikom odpowiednie dopasowanie ortazy.

Korzyści Kliniczne

Wyroby zapewniają podparcie w przypadku urazu karku lub łagodzą ból występujący w wyniku urazu o charakterze „smągnięcia biczem”, sztywności karku i urazu przeciążeniowego.

Ostrzeżenia/Środki Ostrożności/Przeciwwskazania


- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego.
- Nie używać tego produktu, jeśli na dołączonych akcesoriach, komponentach lub na samym produkcie występują jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie nosić stabilizatorów OPPO, jeżeli na dany obszar zostały naniesione rozgrzewające lub generujące ciepło płyny lub maści.
- W przypadku wystąpienia wysypki lub podrażnienia należy zdjąć ortezę i przerwać stosowanie. Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza lub rehabilitanta. Przed użyciem należy skonsultować się z wykwalifikowanym pracownikiem ochrony zdrowia. W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z poniższych problemów należy natychmiast skonsultować się z terapeutą lub lekarzem: orteza powoduje otarcia skóry, odcięcie dopływu krwi lub nietypowy ból karku, lub orteza jest zbyt luźna lub niewygodnie ciasna.
- Należy dbać o czystość kołnierza i znajdującej się pod nim skóry, ponieważ broda i włosy mogą spowodować podrażnienie skóry lub reakcje alergiczne.
- Należy stosować się do instrukcji lekarza dotyczących prawidłowego stosowania w okresie powrotu do zdrowia. Podczas zakładania kołnierza konieczna jest pomoc.
- Kołnierz składa się z części przedniej i tylnej. Położenie każdej części jest odpowiednio oznaczone. Kołnierz należy nosić, stosując się do instrukcji zakładania.
- Komponenty produktu, które są oznaczone symbolami recyklingu, należy poddać recyklingowi. Pozostałe elementy należy usunąć zgodnie z lokalnymi, regionalnymi lub krajowymi przepisami i regulacjami.
- Poważne incydenty występujące w związku z wyrobem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego UE, w którym znajduje się siedziba użytkownika.

Przechowywanie


Przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikać światła słonecznego i/lub narażenia na nadmierne ciepło lub wilgoć.

Instrukcje Prania

- **Wkładki**
Wyjąć wkładki z plastikowych ramek. Wkładki należy prać ręcznie w zimnej wodzie z użyciem łagodnego mydła i dokładnie wypłukać. Rozwieszać do wysuszenia, nie wybielać, nie prasować ani nie czyścić chemicznie. Włożyć wkładki z powrotem na swoje miejsce. Upewnić się, że bliższa strona jest skierowana w stronę skóry, a matową przymocować do odpowiednich plastikowych ramek. Wyregulować wkładki, aby zapewnić, że skóra nie ma kontaktu z plastikowymi ramkami. Uwaga: regularnie prać wkładki, aby uniknąć podrażnienia skóry. Można kupić dodatkowe wkładki na wymianę.
- **Plastikowe ramki**
Utrzymywać plastikowe ramki w suchym stanie. W przypadku zabrudzenia należy przetrzeć wilgotną ścierką, a następnie wysuszyć na powietrzu.
- Poniżej znajduje się objaśnienie symboli prania na etykiecie dotyczącej pielęgnacji produktu.

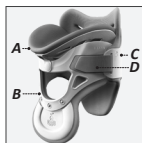
**Przewodnik Po Częściach Produktu**

- Podpórka brody
- Część przednia
- Część tylna
- Łatwo zapiwany pasek

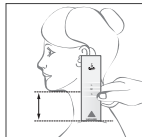Rozmiary

Ustawić głowę pacjenta w neutralnej, wyrównanej pozycji. Umieścić przyrząd do wyboru rozmiaru z boku głowy pacjenta w prostej linii w najwyższym punkcie ramienia (mięsień czworoboczny). Zmierzyć odległość od wierzchołka brody do mięśnia czworobocznego i wybrać odpowiedni rozmiar zgodnie z tabelą rozmiarów.

Uwaga: Jeśli wymiar znajduje się pomiędzy dwoma, kolejnymi rozmiarami, należy najpierw wypróbować mniejszy rozmiar.

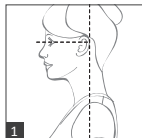Warunki Ambulatoryjne Instrukcje Zakładania


Krok 1
Ustawić głowę i szyję pacjenta w neutralnej, wyrównanej pozycji. Poprosić, aby pacjent patrzył prosto przed siebie.



Krok 2
Umieścić podpórkę brody przedniej części kołnierza pod brodą. Upewnić się, że broda pacjenta opiera się na środkowej części podpórki brody.




Krok 3
Zgiąć boki przedniej części wzdłuż mięśnia czworobocznego i wokół szyi pacjenta.

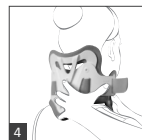


Krok 4
Zgiąć tylną część i umieścić ją na karku pacjenta. Wyrównać tylną część z linią środkową kości potylicznej. Zapiąć łatwo zapiwane paski na przedniej części.



Krok 5
Przytrzymując przednią część na środku, wyregulować łatwo zapijane paski po obu stronach aż do pewnego zabezpieczenia kołnierza na miejscu.
※ Krawędzie tylnej części powinny nachodzić na krawędzie przedniej części.

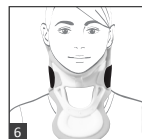


Krok 6
Upewnić się, że kołnierz jest stabilnie zamocowany paskami i przylega do szyi pacjenta. Oba końce tylnej części powinny być symetrycznie połączone po zapięciu pasków.

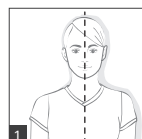Pozycja Leżąca Instrukcje Zakładania

Krok 1
Ustawić głowę i szyję pacjenta w neutralnej, wyrównanej pozycji.



Krok 2
Wsunąć tylną część pod kark pacjenta, wyrównując środek części z kością potyliczną.

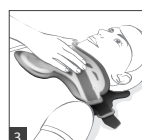

Krok 3
Umieścić podpórkę brody przedniej części kołnierza pod brodą. Upewnić się, że broda pacjenta prawidłowo opiera się na środkowej części podpórki brody.




Krok 4
Zgiąć boki przedniej części wzdłuż mięśnia czworobocznego i wokół szyi pacjenta.




Krok 5
Wyrównać tylną część i zapiąć łatwo zapijane paski po obu stronach przedniej części.

※ Krawędzie tylnej części powinny nachodzić na krawędzie przedniej części.

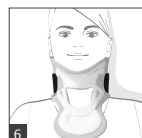

Krok 6
Wyregulować łatwo zapijane paski po obu stronach aż kołnierz będzie prawidłowo zabezpieczony na miejscu i przylega do szyi pacjenta. Równocześnie upewnić się, że oba końce tylnej części są symetrycznie połączone po zapięciu pasków.

※ Produkt ten jest dostarczany w różnych rozmiarach. W celu doboru najlepiej dopasowanego rozmiaru należy zapoznać się z tabelą rozmiarów na opakowaniu.

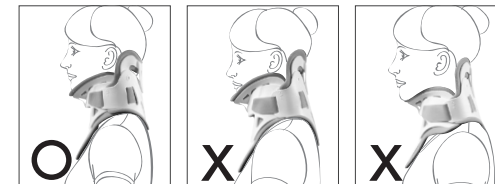Kontrola Zakładania

- Środek przedniej części powinien znajdować się w linii prostej z wierzchołkiem nosa.
- Broda powinna znajdować się w zagłębieniu podpórki brody, nie powinna wystawać z osłony brody ani opadać poza podpórki brody.
- Tylna część powinna nachodzić na przednią część pod uszami. Nie powinna przykrywać uszu.
- Prawidłowa odległość między nachodzącą częścią a szyją to grubość palca.
- Należy wybrać mniejszy rozmiar, jeśli broda pacjenta opada poza podpórki brody lub większy rozmiar, jeśli broda wystaje poza krawędź kołnierza.
- Żadne plastikowe elementy nie powinny mieć kontaktu ze skórą. Wkładki powinny wystawać poza plastikowe krawędzie.
- Łatwo zapijane paski można skrócić, jeśli po wyregulowaniu są za długie.

is a registered trademark of OPPO MEDICAL INC.
© OPPO MEDICAL INC. All rights reserved.

OPPO MEDICAL INC.
Seattle City Center, 1420 Fifth Ave., Ste. 220080, Seattle, WA 98101, USA
www.oppomedical.com

AUTHORISED REPRESENTATIVE: MT PROMEDT CONSULTING GMBH
ADDRESS: ERNST-HECKEL-STRASSE 7, 66386 ST. INGBERT, GERMANY





4098

KRČNÍ LÍMEC – PROFESIONÁLNÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

VYDÁNÍ: 2021-04-30
VERZE: 03

Zamýšlené Použití/Indikace/Zamýšlený Uživatel

- Prostředky také ulevují od bolesti způsobené hyperextenzí krku, ztuhlostí krku a přetížením. Drží krční páteř ve stabilní pozici a udržují ji v neutrální poloze.
- Tyto prostředky jsou určeny pro lidi, kteří trpí bolestí krku, ztuhlostí, zraněními z přetažení a/nebo osoby, které vyžadují opěrku krční páteře.

Charakteristické Funkce

Prostředky zajišťují terapeutickou oporu pro ty, kteří utrpěli poranění krku. Vytvarované materiály zajišťují stabilní a pohodlné nošení, zatímco perforace udržují pro uživatele dobrou ventilaci. Konstrukce tvořená háčkem a smyčkou umožňuje, aby si uživatelé upravovali tuhost ortézy.

Klinické Výhody

Prostředky poskytují oporu poraněnému krku nebo ulevují od bolesti způsobené hyperextenzí krku, ztuhlostí krku a přetížením.

Varování/Preventivní Opatření/Kontraindikace

- Tento produkt je určen pouze pro osobní použití.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud je poškozeno připojení příslušenství, součásti nebo samotný výrobek.
- Nenoste ortézy OPPO, pokud byly na postiženou oblast aplikovány zahřívací masti.
- Pokud dojde k vyrážce nebo podráždění, odstraňte ortézu a přestaňte ji používat. Okamžitě vyhledejte lékaře. Tento produkt by měl být používán pouze podle pokynů lékaře nebo terapeuta. Před použitím se poraďte s kvalifikovaným zdravotníkem. Pokud nastane jakýkoli z následujících problémů, obraťte se ihned na svého terapeuta nebo lékaře: ortéza způsobuje odření, ztrátu oběhu nebo neobvyklou bolest krku a ortéza je příliš volná nebo nepříjemně napnutá.
- Límeček a kůži pod ním udržujte v čistotě, protože vlasy a vousy mohou způsobit podráždění kůže či alergické reakce.
- Pro správné nasazení během uzdravování postupujte podle pokynů lékaře. Při nasazování tohoto krčního límce je nutná pomoc další osoby.
- Krční límeček se skládá z předního a zadního dílu. Na každém dílu je vyznačena jeho orientace a noste límeček podle pokynů pro nošení.
- Recyklujte součásti produktu, které nesou recyklační symboly. Zbytek zlikvidujte v souladu s místními, regionálními nebo národními zákony a předpisy.
- Vážné události, ke kterým dojde v souvislosti se zařízením, by měly být nahlášeny výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel bydliště.

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě. Chraňte před slunečním zářením a/nebo vystavením nadměrnému teplu nebo vlhkosti.

Pokyny K Praní

• Polštářky

Vyjměte polštářky z plastových rámečků. Perte polštářky v ruce slabým mýdlem ve studené vodě a důkladně opláchněte. Sušte zavěšené, nepoužívejte bělicí přípravky, nežehlete ani chemicky nečistěte. Vratte polštářky zpět do jejich původní polohy. Zajistěte, aby byla lesklá strana otočena směrem ke kůži a matná strana připojena k příslušným plastickým rámečkům. Upravte polštářky, aby bylo zajištěné, že vaše kůže nebude ve styku s plastovými rámečky.

Poznámka: Polštářky perte periodicky, aby nedošlo k podráždění kůže. Pro výměnu lze zakoupit přídavné polštářky.

• Plastové rámečky

Uchovávejte plastové rámečky v suchu. Při znečištění otřete dočista navlhčenou látkou, pak nechte uschnout na vzduchu.

- Níže je uveden průvodce pro čištění symbolů na štítku péče o výrobek.



Pouze ruční
praní



Nebělte



Nesušte v
buňkové
sušičce




Nežehlete




Chemicky
nečistěte

Průvodce Součástmi Produktu

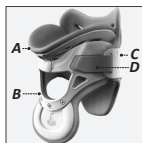

- A. Ortéza na bradu
- B. Přední díl
- C. Zadní díl
- D. Snadno zajištělný popruh


Velikost

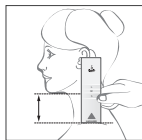

Udržujte neutrální vyrovnaní hlavy pacienta. Umístěte průvodce velikostí podél hlavy pacienta v ose s nejvyšším bodem ramena (trápězový sval). Měřte od špičky brady po trápězový sval a vyberte vhodnou velikost podle tabulky velikostí.

Poznámka: Pokud je naměřená hodnota mezi dvěma po sobě jdoucími velikostmi, vyzkousejte nejprve menší velikost.



Pokyny Pro Ambulantní Nošení

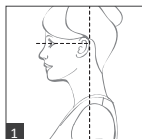

Krok 1
Udržujte neutrální vyrovnaní hlavy a krku pacienta, nechte pacienta dívat se přímo vpřed.

Krok 2
Umístěte přední kus opěrky brady pod bradu. Dbejte na to, aby se brada pacienta opírala o střed opěrky brady.

Krok 3
Ohněte strany předního dílu přes trápězový sval a přitlačte ke krku pacienta.

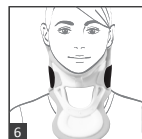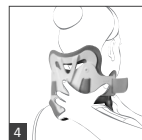




Krok 4
Ohněte zadní kus a nasadte jej na zadní stranu krku. Vyrovnajte zadní kus podle osy týlní kosti. K přednímu dílu připevněte snadno zajištělné popruhy.

Krok 5
Držte přední kus vystředěný, upravte snadno zajištělné popruhy na obou stranách, dokud nebude límeček plně zabezpečen.

※ Konce zadního dílu by měly přesahovat přes konce předního dílu.

Krok 6
Límeček musí být zajištěný popruhy a být nasazený okolo krku pacienta. Oba konce zadního dílu by po zajištění popruhů měly být symetricky připevněny.

Pokyny Pro Nošení Vleže Na Zádech

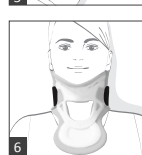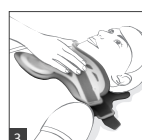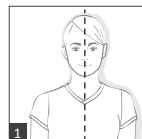

Krok 1
Udržujte neutrální vyrovnaní hlavy a krku pacienta.

Krok 2
Umístěte zadní díl za krk pacienta a zajištěte vystředění zadního dílu pod týlní kosti.

Krok 3
Umístěte přední kus opěrky brady pod bradu. Dbejte na to, aby se brada pacienta správně opírala o střed opěrky brady.

Krok 4
Ohněte strany předního dílu přes trápězový sval a přitlačte ke krku pacienta.




Krok 5
Vystředte zadní díl a k přednímu dílu připevněte snadno zajištělné popruhy.

※ Konce zadního dílu by měly přesahovat přes konce předního dílu.

Krok 6
Upravte snadno zajištělné popruhy na obou stranách, dokud nebude límeček zajištěný a nasazený okolo krku pacienta. Mezitím by oba konce zadního dílu po zajištění popruhů měly být symetricky připevněny.

※ Tento výrobek je dodáván v různých velikostech. Ten, který vám nejlépe vyhovuje, najdete v tabulce velikostí na obalu.

Zkontrolujte Nasazení

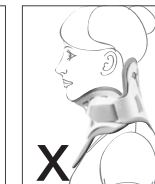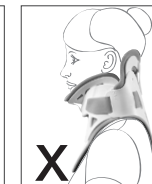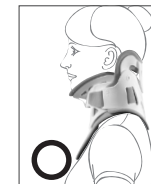

- Střed předního dílu by měl být v linii se špičkou nosu.
- Brada by měla být umístěna v prohlubni opěrky brady, nesmí přesahovat přes okraj vycpávky brady ani zapadnout za opěrku brady.
- Zadní díl by měly přesahovat přes předního díl pod ucho. Ucho nezakrýváte.
- ※ Mezi přesahující částí a krkem by měl být prostor na šířku prstu.
- Zkuste menší velikost, pokud brada pacienta zapadá za opěrku brady, nebo větší velikost, pokud je brada převislá přes okraj límce.
- Žádné plastové díly by neměly přijít do styku s kůží, polštářky by měly přesahovat přes plastové hrany.
- Pokud budou po usazení snadno zajištělné popruhy příliš dlouhé, lze je seříznout.



4098

PROFESIONÁLNY KRČNÝ GOLIER

NÁVOD NA POUŽITIE

VYDANIA: 2021-04-30
VERZIA: 03

Zamýšľané Použitie/Indikácia/Zamýšľaný Používateľ

- Prostriedky zmierňujú bolesť pri hyperextenznom poranení krčnej chrbtice, pri stuhnutom krku a zraneniach v dôsledku natiahnutia. Stabilizujú polohu krčnej chrbtice a držia ju v neutrálnej polohe.
- Tieto zariadenia sú určené pre osoby, ktoré trpia bolesťou krku, meravosťou, poškodeniami v dôsledku preťaženia a/alebo osôb, ktoré potrebujú oporu krčnej chrbtice.

Účinné Vlastnosti

Zariadenia poskytujú terapeutickú oporu osobám, ktoré utrpeli zranenia krku. Tvarované materiály zabezpečujú stabilitu a pohodlie, zatiaľ čo otvory poskytujú používateľom dobrú ventiláciu. Dizajn so suchým zipsom umožňuje úpravu tesnoty výstuhy.

Klinické Výhody

Zariadenia poskytujú oporu pri zraneniach krku alebo úfavu od bolesti pri hyperextenznom poranení krčnej chrbtice, pri stuhnutom krku a zraneniach v dôsledku preťaženia.

Varovanie/Opatrenie/Kontraindikácia

- Tento produkt je určený iba na osobné použitie.
- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený príslušenstvo, komponenty alebo samotný výrobok.
- Nepoužívajte výrobky OPPO spolu so zahrievacími olejmi alebo masťami.
- V prípade výskytu vyrážky alebo akéhokoľvek podráždenia, prestaňte výrobok používať a kontaktujte lekára. Tento výrobok sa smie používať iba na základe predpisu lekára alebo terapeuta. Skôr ako ho použijete, poraďte sa s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom. Ak nastane ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov, okamžite sa poraďte so svojím terapeutom alebo lekárom: výstuha spôsobuje trenie, obmedzuje krvný obeh, spôsobuje nepríjemnú bolesť krku, je príliš voľná alebo nepríjemne tesná.
- Udržiavajte golier a pokožku pod ním čisté, keďže brada a vlasy môžu spôsobiť podráždenie pokožky alebo alergické reakcie.
- Riadte sa pokynmi lekára týkajúcimi sa správneho používania počas priebehu liečby. Na nasadenie tohto krčného goliera sa vyžaduje pomoc.
- Krčný golier tvorí predný a zadný diel. Každý diel je označený podľa svojej orientácie. Golier noste len v súlade s pokynmi na nosenie.
- Recyklujte komponenty produktu, ktoré sú označené symbolmi recyklácie. Zvyšok zlikvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi alebo národnými zákonmi a predpismi.
- Vážne udalosti, ktoré sa vyskytnú v súvislosti so zariadením, by sa mali hlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ bydlisko.

Skladovanie

Skladujte pri izbovej teplote. Chránajte pred slnečným žiarením a pôsobením nadmerného tepla alebo vlhkosti.

Pokyny Na Pranie

• Vypchávk

Vyberte vypchávk z plastových rámov. Vypchávk operte ručne v studenej vode použitím jemného mydla a dôkladne ich opláchnite. Nechajte vyschnúť, nežehlite, nepoužívajte bieliadla ani chemické čistenie. Vráťte vypchávk do pôvodnej polohy. Uistite sa, že lesklá strana prilieha k pokožke a opačná strana je pripojená k príslušným plastovým rámom. Nastavte vypchávk tak, aby vaša pokožka neprišla do styku s plastovými rámi. Poznámka: Vypchávk pravidelne umývajte s cieľom predísť podráždeniu pokožky. Dodatočne si môžete zakúpiť náhradné vypchávk.

• Plastové rámy

Plastové rámy uchovávajte v suchu. V prípade znečistenia dočista poutierajte vlhkou handričkou a nechajte vyschnúť na vzduchu.

- Ďalší návod na čistenie je uvedený na štítku výrobku príslušnými symbolmi.



Iba pranie v ruke



Nebieľte



Nesušte v sušičke




Nežehlite




Nečistite chemicky

Sprievodca Časťami Produktu

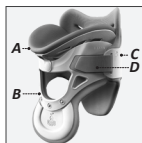

- A. Podpera brady
- B. Predný diel
- C. Zadný diel
- D. Remienok na ľahké zaistenie



Veľkosti

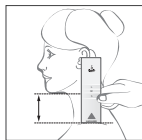

Držte hlavu pacienta v neutrálnej polohe. Pomôcku na určenie veľkosti priložte k jednej strane hlavy pacienta v priamej línii od najvyššieho bodu pleca (lichobežníkového sval). Merajte od špičky brady po lichobežníkový sval a pomocou tabuľky veľkostí vyberte správnu veľkosť.

Poznámka: Ak meranie spadá do dvoch po sebe nasledujúcich veľkostí, vyskúšajte najskôr tú menšiu.




Ambulantne Pokyny Na Nosenie

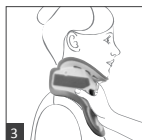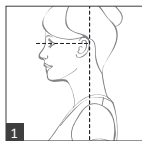

Krok 1
Držte hlavu a krk pacienta v neutrálnej polohe. Pacienta inštruujte, aby pozeral dopredu.

Krok 2
Umiestnite podperu brady predného dielu pod bradu. Uistite sa, že pacientova brada leží v strede podpory brady.

Krok 3
Ohnite strany predného dielu cez lichobežníkový sval a okolo krku pacienta.

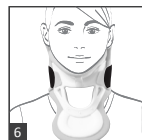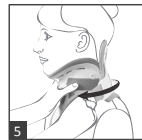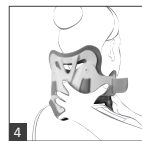

Krok 4

Ohnite zadný diel a priložte ho k zadnej časti krku. Zadný diel zarovnajete so stredovou líniou záhlavnej kosti. K prednému dielu pripojte popruhy na ľahké zaistenie.

Krok 5


Podržte predný diel v strede a upravte popruhy na ľahké zaistenie na oboch stranách, kým nebude golier úplne zaistený.

※ Konce zadného dielu by sa mali prekryvať s koncami predného dielu.

Krok 6

Uistite sa, že je golier zaistený popruhmi a sedí okolo krku pacienta. Po zaistení popruhov musia byť oba konce zadného dielu symetricky pripevnené.


Ležmo Pokyny Na Nosenie

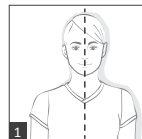


Krok 1
Držte hlavu a krk pacienta v neutrálnej polohe.




Krok 2
Zadný diel zasunúť pod krk pacienta a uistite sa, že je stred zadného dielu pod záhlavnou kosťou.

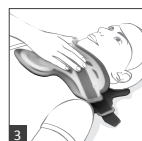

Krok 3
Umiestnite podperu brady predného dielu pod bradu. Uistite sa, že pacientova brada riadne leží v strede podpory brady.

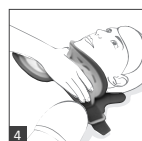


Krok 4
Ohnite strany predného dielu cez lichobežníkový sval a okolo krku pacienta.

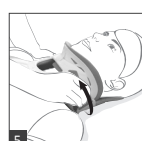

Krok 5
Vycentrujte zadný diel a pripojte obe strany popruhov na ľahké zaistenie k prednému dielu.



※ Konce zadného dielu by sa mali prekryvať s koncami predného dielu.

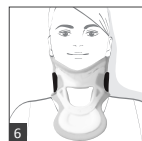

Krok 6
Upravte obe strany popruhov na ľahké zaistenie, kým nebude golier zaistený a sedieť okolo krku pacienta. Medzitým musia byť oba konce zadného dielu po zaistení popruhov symetricky pripevnené.

※ Tento produkt je dostupný v rôznych veľkostiach. Ten, ktorý vám najlepšie vyhovuje, nájdete v tabuľke veľkostí na obale.

Kontrola Nosenia

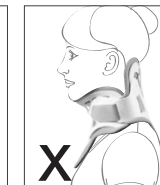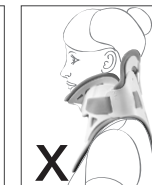

- Stred predného dielu musí byť zarovnaný so špičkou nosa.
- Brada musí byť umiestnená v priehlbine podpory brady, nesmie prečnievať cez okraj podložky brady ani byť zasunutá za podporu brady.
- Zadný diel by sa mal s predným dielom prekryvať pod ušami. Nesmie prekryvať uši.
- Medzi časťou, ktorá sa prekryva, a krkom musí byť vzdialenosť v šírke prsta.
- Ak je brada pacienta zasunutá za podporu brady, vyskúšajte menšiu veľkosť. Ak brada pacienta prečnieva cez okraj goliera, vyskúšajte väčšiu veľkosť.
- S kožou nesmú byť v kontakte žiadne plastové časti, vypchávk musia prečnievať cez všetky plastové okraje.
- Popruhy na ľahké zaistenie je možné skrátiť, ak sú po nasadení príliš dlhé.